

#niwop



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



Ultrabrillante

Los nuevos Piezo Scalers
Proxeo Ultra de W&H



proxeo ULTRA



Fijación ultrarrápida para un cambio de puntas ultrarrápido



q-link



Depósito ultragrande
Con una capacidad de 750 ml, el depósito del Proxeo Ultra es uno de los más grandes del mercado. Encaja perfectamente con la estética de su diseño y, gracias a su forma especial y a su amplia abertura, puede llenarse y limpiarse de forma fácil y cómoda.



Superficies ultralisas
El Proxeo Ultra se puede desinfectar fácilmente con un paño gracias a su diseño sin cantos y a sus superficies lisas.



Libertad de movimientos ultraflexible
Nunca antes había sido tan fácil cambiar de posición. Coloque el pedal de control inalámbrico en el lugar que más le convenga, sin molestos cables.



Detección automática de nivel ultrapráctica
El Proxeo Ultra PB-530 le avisa con antelación cuando el agua se está acabando. De este modo, podrá incorporar cómodamente el rellenado a su proceso de trabajo.



Iluminación ultraluminosa
El anillo LED proporciona una iluminación similar a la luz del día en el área de tratamiento.



Pieza de mano ultraergonómica
Diseño estilizado y manguera ultraflexible para una fácil adaptación, un equilibrio perfecto y una mayor comodidad para el usuario.



Ajuste de potencia ultrasuave
El modo básico puede ajustarse fácilmente con el regulador giratorio.

Ultraeficiente

Piezo Scalers Proxeo Ultra

Los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra de W&H han sido desarrollados en colaboración con profesionales de la profilaxis y hacen honor a su nombre. Las ventajas exclusivas para el usuario, como el «Q-Link», el sistema de sujeción rápida único en el mundo, o la compatibilidad acreditada con los marcapasos, permiten un tratamiento ultra eficiente.



Cambio de puntas ultrarrápido

La nueva pieza de mano del Piezo Scaler Proxeo Ultra viene con un sistema de sujeción rápida especialmente desarrollado y patentado. La punta se enrosca o se desenrosca con una sola vuelta. De este modo, el cambio de las puntas no sólo es más rápido, sino que también es mucho más fácil.



Wioletta Friedrich, B.Sc.

Higienista dental


«Sin el Q-Link de W&H, siento que he vuelto a la Edad de Piedra.»



Barbara Schwark

Ponente sobre profilaxis

«¡Estoy encantada! ¡Queda claro que los Piezo Scalers de W&H son seguros para su uso en pacientes con marcapasos sin correr ningún riesgo!»

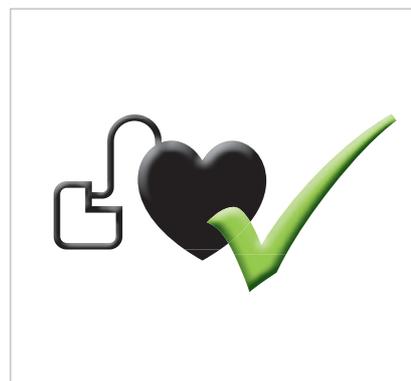

Sensación de ultraseguridad

Según un estudio independiente de la Universidad Tecnológica de Graz, los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra puede utilizarse sin inconvenientes en pacientes con marcapasos. Esto garantiza una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los pacientes.

Sistemas de Proxeo Ultra

PB-530

- › Sistema de sujeción rápida Q-Link
- › Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- › Pieza de mano con anillo LED
- › Manguera fina y flexible
- › Pedal de control inalámbrico
- › Detección automática de nivel
- › Ajuste de potencia continuo
- › Gama de puntas perfectamente adaptada
- › Depósito grande (750 ml)
- › Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras



PB-520

- › Sistema de sujeción rápida Q-Link
- › Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- › Pieza de mano con anillo LED
- › Manguera fina y flexible
- › Ajuste de potencia continua
- › Gama de puntas perfectamente adaptada
- › Depósito grande (750 ml)



PB-510

- › Sistema de sujeción rápida Q-Link
- › Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- › Pieza de mano con anillo LED
- › Manguera fina y flexible
- › Ajuste de potencia continuo
- › Gama de puntas perfectamente adaptada



Ultra como ultragenial

¡Así de fácil puede ser la eliminación del sarro! Las piezas de mano ergonómicas y ligeras, junto con el pedal de control inalámbrico, garantizan un manejo perfecto y la máxima flexibilidad durante cada tratamiento.



Selección de primera

Proxeo Ultra está disponible con el exclusivo sistema de sujeción rápida Q-Link. También están disponibles otras dos piezas de mano con rosca clásica. El cambiador de puntas con el controlador de torque integrado evita un enroscado excesivo y permite un cambio de puntas sencillo y seguro.



W&H Q-Link




W&H/EMS/
Mectron



W&H/NSK/
Satelec

Amplia gama de usos

Gracias a la regulación continua de la potencia, los Piezo Scalers de W&H puede ajustarse sin problemas a las puntas y a las aplicaciones en cada momento. Las posibilidades de aplicación son especialmente versátiles, desde profilaxis y periodontología, pasando por la conservación de implantes o endodoncia, hasta micropreparación de restauraciones.

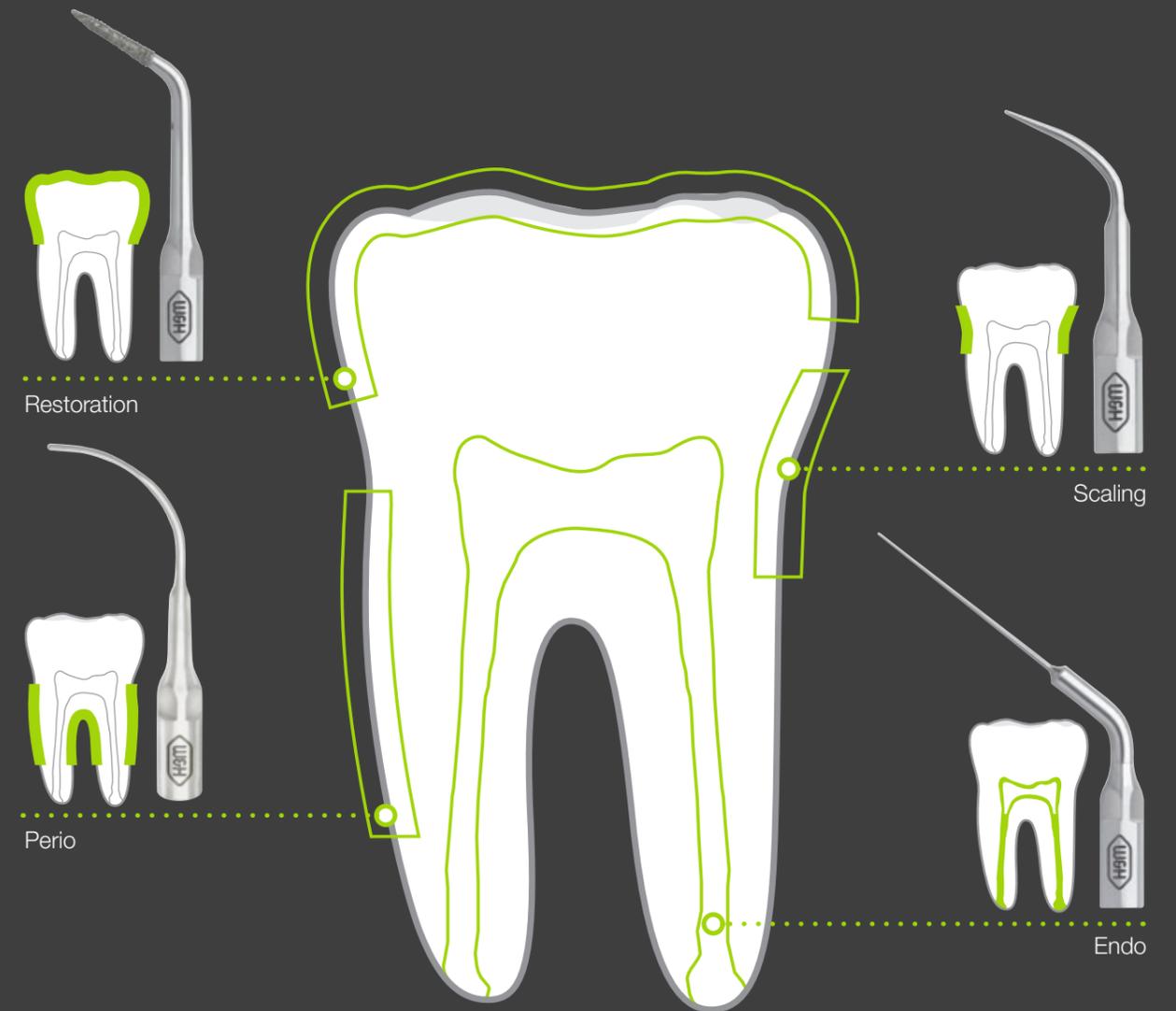

Piezo Scalers de W&H

Los Piezo Scalers de W&H puede integrarse de forma óptima en su proceso de trabajo. Puede elegir la solución individual Tigon+, el Piezo Scaler Proxeo Ultra o aprovechar las ventajas de una solución integrada de manera sencilla en su unidad dental.



Tigon+

Solución individual exclusiva con líquido termorregulable para garantizar un nivel máximo de confort para el paciente.



PB-530

El Piezo Scaler de W&H con pedal de control inalámbrico ofrece una mayor libertad de movimientos y un máximo confort para el usuario.



PB-520/PB-510

Los modelos compactos del Piezo Scaler Proxeo Ultra convencen con o sin depósito.



Solución integrada (Built-in)

Fabricantes de unidades seleccionados ofrecen los Piezo Scalers de W&H como solución de accionamiento integrada en el marco del sistema global. El uso se realiza de forma cómoda y sencilla a través de la central de control de su unidad dental. Consulte a W&H o al fabricante de su unidad para conocer más detalles sobre los Piezo Scalers de W&H como solución integrada.

Más seguridad para cada paciente

W&H es el primer fabricante que confirma el uso seguro de sus Piezo Scalers en pacientes con marcapasos. Con un informe independiente de la Universidad Tecnológica de Graz, los usuarios tienen ahora la seguridad que necesitan para el tratamiento profiláctico de pacientes con marcapasos.



Compatibilidad de las puntas con las piezas de mano de W&H


	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Integrado (Built-in)	X	X		X	X		X

* Las puntas Q-Link (p. ej. 1UQ, 2UQ) son compatibles con la PB-5 L Q.

** Las puntas W&H con rosca Satelec (p. ej. 1US, 2US) son compatibles con las piezas de mano PB-5 L S, PB-3 LED S y PB-3 S de W&H.

Nota: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Al utilizar puntas de otros fabricantes, el usuario debe asegurarse de que los parámetros de rendimiento del equipo piezoeléctrico de W&H están ajustados correctamente.

Sistema de código de colores

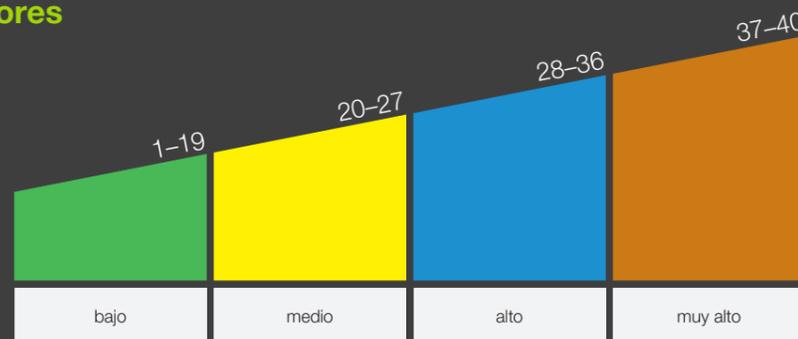

Especificación de los indicadores del nivel de intensidad de las puntas W&H con rosca Satelec

Datos técnicos Proxeo Ultra

Equipo	PB-530	PB-520	PB-510
Tensión de red:	100-230 V		
Máxima potencia de salida a la pieza de mano con carga (ultrasonica):	12 W		
Frecuencia (ultrasonica):	22-35 kHz		
Modo de funcionamiento:	S3 (14 s/6 s)		
Longitud del cable de la pieza de mano:	1,8 m		
Medidas en mm (An x Pr x Al):	120x185x205		120x185x110
Peso:	1.106 g	1.064 g	807 g
Apropiado para el pedal de control:	C-NW	C-NF	

Pedal de control	C-NW ((•))	C-NF
Peso:	190 g	114 g
Medidas en mm (An x Pr x Al):	117x117x38	100x110x28
Tipo de batería:	iones de litio	-
Autonomía con carga completa:	aprox. 2 meses	-
En espera:	automático cuando no se acciona	-
Tiempo de carga:	aprox. 3 horas	-

Pieza de mano Piezo Scaler	PB-5 L Q	PB-5 L	PB-5 L S
Luz:	anillo LED		
Peso:	55 g		
Longitud sin punta:	135 mm (con acoplamiento)		
Diámetro:	18,5 mm		

Conjunto integrado analógico	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Piezo Controller:	PC-1.0	
Conjunto de conexión eléctrica:	✓	
Regulador giratorio:	✓	
Manguera de alimentación:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Pieza de mano:	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Cambiador de puntas con punta montada:	TW-1: 1U, 1P	TQ-1: 1UQ, 2UQ, 1PQ/TW-1: 1U, 2U, 1P



Bernhard Eder

Gestor de cartera de productos de W&H, Bürmoos


«Los dentistas e higienistas desempeñaron un papel clave en este producto. Desde los requisitos hasta su diseño y fácil manejo, este producto satisface claramente las necesidades de los usuarios.»



Fanny Bretschneider

Higienista dental, Salzburgo

«El Piezo Scaler Proxeo Ultra hace honor a su nombre. Permite un cambio de puntas ultrarrápido, tiene una pieza de mano ultraergonómica, es ultraflexible en su uso, ultrasencillo en su manejo y ultraversátil en el tratamiento. También es ultrabonito.»

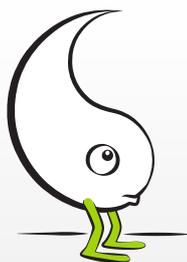

Implantology
without **Periodontology** is
like **Yin** without **Yang**.



#NIWOP: El flujo de trabajo sistemático y basado en la evidencia

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com